


Инструкция

Estelite Universal Flow - светоотверждаемый текучий композитный реставрационный материал для прямых реставраций.



Recommended Cavities

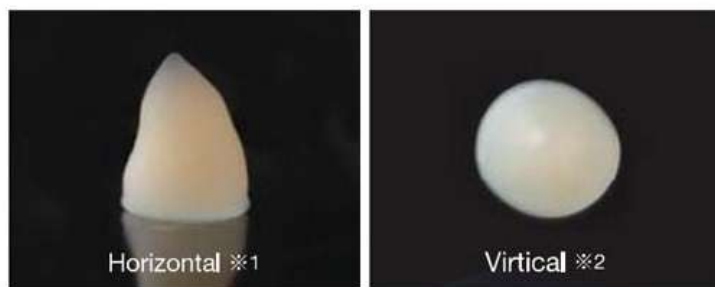


Общие указания

- Не использовать у пациентов с аллергией на метакрилат.
- Избегать попадания препарата на кожу, в глаза, на мягкие ткани.
- Избегать попадания воды, ротовой жидкости или любой другой влаги на область реставрации.
- Беречь от попадания яркого окружающего света.

Подбор цвета

При подборе цвета следует учитывать, что оттенки Estelite Universal Flow светлее, чем Estelite Flow Quick и более соответствуют расцветке VITA и Estelite Sigma Quick.

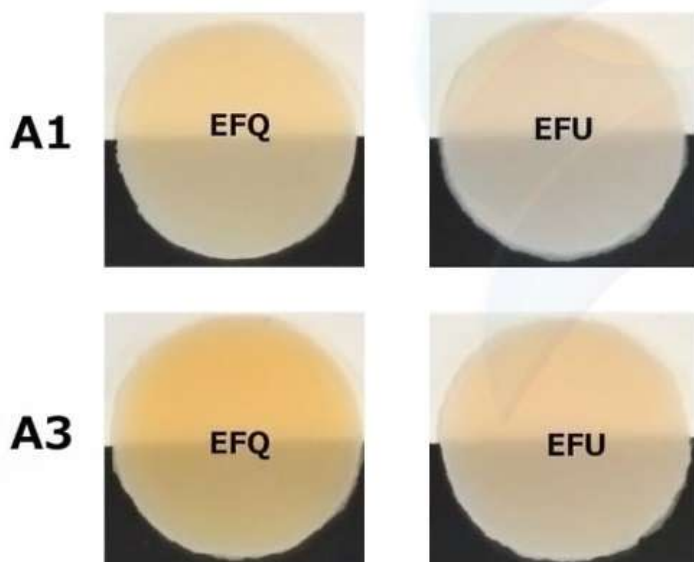

Палитра применение Estelite Universal Flow



Благодаря хамелеон-эффекту один оттенок Estelite Universal Flow может подстраиваться под несколько оттенков шкалы VITA

Figure 1 displays a series of color calibration charts for dental restorations, comparing different tooth types (A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3) across various lighting conditions (Whiter, B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, M, B4, C3, A4, C4, Darker). The charts show color differences (SL, M, H) and opacity/translucency levels. The bottom section includes a color calibration chart for 'HIGH Translucency' (CE) and a color calibration chart for 'For Incisal Area Etc.'.

Использование



- Произвести очистку зубов пастой не содержащей фтор. Определить оттенок зубов
- Выполнить наложение коффердама (можно использовать ватные шарики). Произвести препарирование полости.
- Проведите процедуру адгезии точно следуя инструкции производителя.
- Внесите необходимое количество материала в полость.
- Вносите композитный материал слоями. После внесения слоя адаптируйте материал в полости, чтобы обеспечить хорошее краевое прилегание.
- Полимеризуйте каждый слой в течение 10 секунд.
- Обработайте и отполируйте реставрацию. Для финишной обработки используйте алмазные боры мелкой зернистости. Для сведения границы между композиционным материалом и природным зубом работайте вдоль границы 12-гранным карбидным бором, без воды и на малой скорости. Используйте металлические или виниловые шлифовальные полоски для обработки проксимальных поверхностей. Для полирования используйте резиновые головки или любые другие подходящие полировочные инструменты, такие как PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), или D-FINETM Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

Технические характеристики

- Содержание наполнителя: 70% по весу (56% по объему).
- Полимеризация: до 10 секунд
- Усадка: 2,2%.
- Компрессионная прочность: 425МПа.
- Прочность на изгиб: 150МПа.
- Рабочее время: 90 секунд.
- Рентгеноконтрастность: есть.
- Толщина слоя: не более 2 мм.

Хранение

Хранить при температуре 18-30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Избегать чрезмерного нагрева. Не допускать замораживания. Только для стоматологического применения. Беречь от детей. Срок годности указан на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.